

Hjelp dine pasienter å beholde en fredfull hud




med NovaLife TRE hudplater



Den beste huden er naturlig sunn hud

Huden har fra naturens side et svakt syrlig pH-nivå eller syrekappe. Det er viktig å beskytte dette miljøet da det støtter hudens integritet og evne til å motstå bakterielle angrep.

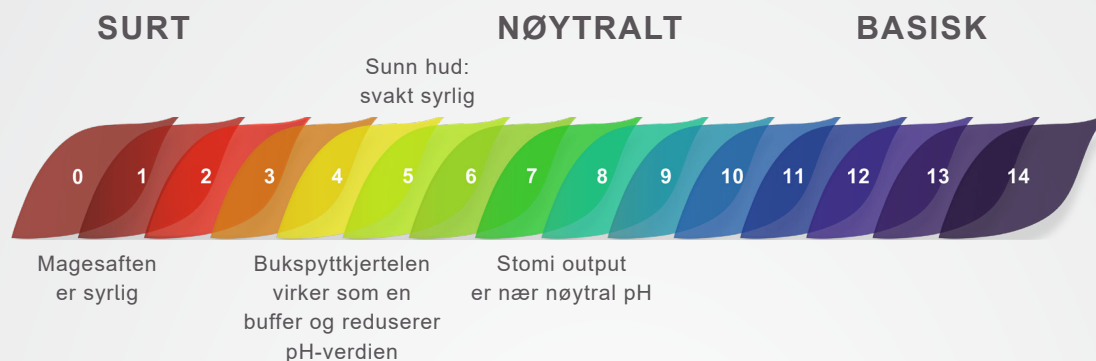

Stomi output er rik på fordøyelsesenzymer. Når de kommer i kontakt med frisk peristomal hud fordøyer disse enzymene det ytterste laget av epidermis, noe som fører til peristomale hudkomplikasjoner (PHK).

PHK er vanlig innen stomipleie og kan ha negativ effekt på pasientens livskvalitet. Tradisjonelt behandles PHK reaktivt, det vil si når de oppstår.

Hva hvis en hudplate kunne hjelpe deg å proaktivt beskytte pasientens hud for å holde den naturlig sunn?



La NovaLife TRE hudplater hjelpe deg å bevare pasientenes hud i naturlig balanse

Oppdag NovaLife TRE hudplater fra Dansac, spesielt utviklet for å holde huden naturlig sunn med tre nivåer av beskyttelse.

TRE serien består av endels og todelt posesystem med flat, soft convex og convex hudplate.



TRE hudplate teknologi

Gir tre nivåer av beskyttelse

pH balanse: 

Utviklet for å motvirke fordøyelsesenzymeres skadelige effekter ved å opprettholde hudens naturlige pH-nivå.

Absorpsjon: 

Bidrar til å absorbere overflødig fuktighet for å opprettholde hudens naturlige balanse, uten å miste innvendig eller utvendig styrke.

Klebeevne: 


Fleksibelt og trygt design som beskytter huden rundt stomien fra stomi output. Produktene er enkle å fjerne og skånsomme mot huden.

TRE pH buffer teknologi

Den patenterte formelen er utviklet for å opprettholde en svakt syrlig pH-verdi som understøtter naturlig sunn hud. Dette resulterer samtidig i et ugunstig miljø for fordøyelsesenzymene, hvilket gjør at deres aktivitet reduseres.

- Bufferteknologien gjør at pH-nivået opprettholdes, selv om omgivelsene endres.
- Endringer i pH-nivå forårsaket av faktorer som stomi output eller svette kan svekke en sunn syrekappe
- En svekket syrekappe gjør at huden kan bli lettere mottagelig for skader og infeksjoner

- TRE teknologien er utviklet for å effektivt opprettholde pH-nivået i sunn hud og beskytte den mot ytre påvirkning.

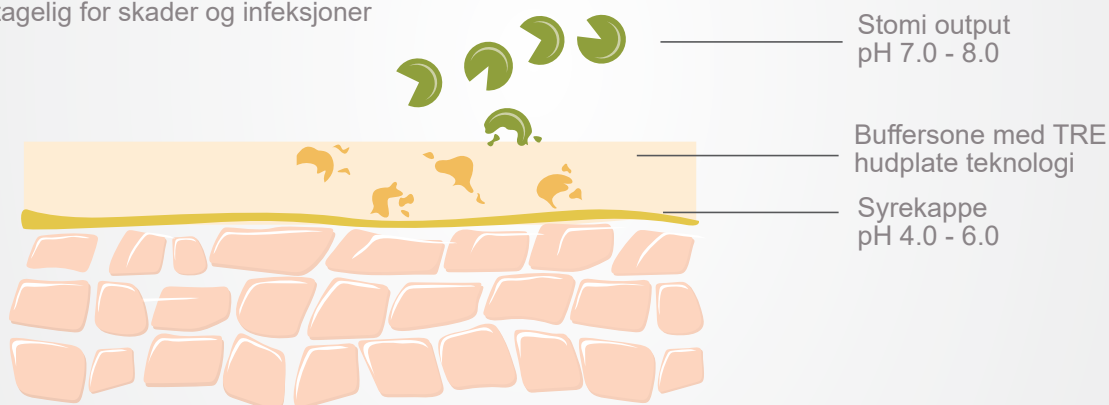

Erfaringer med TRE teknologien¹

Klinisk effekt
Gjennomsnittlig DET² score ble redusert med:

2.8

fra 4,25 til 1,5 (p<0,001)



Tilbehør
Registrert fall i bruk av tilbehør:

44%



Tilfredshet
Andel brukere som var tilfreds med NovaLife TRE:

91%

"77% av pasientene opplevde at hudens tilstand ble "forbedret" eller "svært forbedret etter bruk"

¹ Erfaringer er samlet i en rapport av Dansac NovaLife TRE 1-dels Soft Convex evalueringer gjennomført i Storbritannia i 2018. Evalueringen involverte 92 sentere med 254 pasienter.
² GC Jemec et al. Assessing peristomal skin changes in ostomy patients (...). British Journal of Dermatology, Volume 164, Issue 2, pages 330-335, February 2011
DET: Discolouration, Erosion and Tissue overgrowth



Oppdag NovaLife TRE hudplater.

Hjelper dine pasienter å bevare
en fredfull hud.

NovaLife TRE hudplater fra Dansac inneholder en innovativ teknologi som hjelper til å holde huden til dine pasienter naturlig sunn. De er utviklet for å gi tre nivåer av hudbeskyttelse; pH balanse, absorpsjon og klebeevne. Denne teknologien gir deg mulighet til å adressere potensielle peristomale hudkomplikasjoner før de oppstår. Når det gjelder huden til pasientene dine, vil den aldri kunne bli *for* beskyttet.

Hos Dansac er vi dedikert til å møte behovene til både stomiopererte og helsepersonell. Vi jobber konstant for å utvikle innovative produkter og tjenester med spesielt fokus på naturlig sunn hud, slik at vi bidrar til å gjøre livet med stomi lettere.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Tlf 66 77 66 50 • kundeservice.norge@dansac.com
www.dansac.no

dansac O
Dedicated to Stoma Care



Før bruk, vennligst lese bruksanvisningen for å få opplysninger om bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.

Dansac logoen, NovaLife og TRE er varemerker tilhørende Dansac A/S.
©2020 Dansac A/S
NO-00009